



クイッキーSR45

The Superior Standard for Wheelchair Tilt Technology

アイリス
クイッキーIRISの廉価モデルが

お求めやすい価格で登場！

IRIS独自のローテーション・ティルト・システムはそのままに、オプションを絞ることで、この価格が実現しました。



SR45基本価格 298,000 円

※基本価格には以下のオプションが含まれます。

- ・標準シートパン
- ・シングルポスト
高さ調整式アームレスト
- ・コンポジットフットプレート

クイッキーIRISとの違い

- ・ティルト角度0度～45度
- ・フレームカラーは5色
- ・トウラー・フィット・プログラム未対応

クイッキーIRISと同等の性能

- ・インテリジェント・ローテーション・ティルト・システム (= IRIS)
- ・シート幅は14～20インチ (35.6～50.8cm)
- ・奥行き・車軸位置調整機能
- ・リクライニング・オプション取り付け可能
- ・ジェイ・フィットバック等のジェイ・シーティング
製品との相性は抜群

ティルト角度は0～45度！



クイッキー I R I S の廉価モデルが破格の安さで登場！

厳選されたオプションにスマート・ローテーション機構を搭載した新モデルです！

■ ローテーション・システム

※1



クイッキーSR45は、障害児・者に関わる方々やご家族のご要望に応じて開発されたサンライズメディカル社製 成人用ティルト型車いす「クイッキー I R I S」の低価格モデルです。

I R I S 最大の特徴である次世代型ティルト機構（ローテーションシステム）は、シートを後方に倒してティルトするのではなく、アーチ状のレールに沿って円を描くようにスライドしてティルトするシステムです。

この方式により車いす自体はコンパクトでありながら大きなティルト角度を実現しました。※1

■ 厳選されたオプション

※2




- 0～45度ティルト角度※1
- クイッキー I R I S と同様の高さ調整アームレストが標準装備※2
- バックレストは、固定式、高さ調整式、リクライニングの3タイプ
- スイングアウトに加えてスイングインもするフットレストハンガー
- ハンガー角度 70°、80°、90°
- 前部シート高は、低床 14.0"(35.6cm)～から選択できます
- フレームカラーは5色（ブラック、ブラックオパール、ブルーオパール、キャンディーブルー、キャンディレッド）


※3



※3

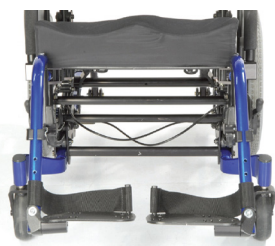

※4

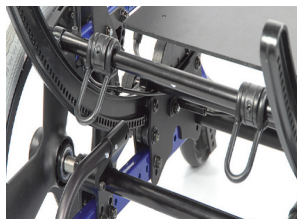

※5



- ティルトのためのレールにあるライン状の隆起部分により、受け部分の溝とともに横揺れの防止をします※2※5
- ティルト操作は、両手レバー式（標準）または片足操作（オプション）から選択
- 車載用取り付け金具（固定用フック、オプション）※4
- ケーブルマネジメントシステムにより、すっきりとした外観と使いやすさを実現しました※3

ACCESS
international

株式会社
アクセスインターナショナル
URL : <http://www.accessint.co.jp>
Eメール : info@accessint.co.jp

販売店

■ 東京本社 : 〒123-0871 東京都足立区樺1-1-12
TEL : 03-5856-9611 FAX : 03-5856-9622
■ 大阪営業所 : 〒590-0982 大阪府堺市堺区海山町4-163-11
TEL : 072-223-1152 FAX : 072-223-1154